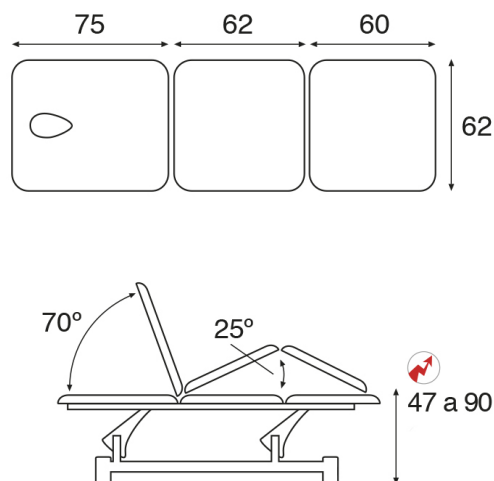


FICHA TÉCNICA C5526**Características generales**

Camilla eléctrica biela blanca 3 cuerpos.

Dimensiones del lecho estándar: 62x198 cm (M46)

Dimensiones de lecho opcional: 70x198 cm (M66)

Peso máximo recomendado: 175 Kg

Variación de altura: 47-90 cm

Regulación de altura mediante motor eléctrico con accionamiento periférico.

Elevación con desplazamiento lateral < 20cm

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250°C

Patas de 70 mm de diámetro. Patas con nivelador ajustable en dos de ellas.

Camilla provista de rodamientos en la biela.

Ruedas escamoteables mediante pedal. Solo desplazamiento de la camilla en vacío, NO para el transporte de pacientes.

Portarrollos abatible blanco incorporado de serie.

Respaldo standard tipo T13 - Respaldo rectangular. Orificio lágrima con tapón incluido.

Módulo del cabezal/respaldo regulable mediante pistón hidráulico.

Módulo central regulable manualmente, mediante cremallera.

Peso aproximado: 83 Kg

Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.

Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.

Disponibile en 25 colores.

Grosor de la espuma 5 cm.

Espuma grado de firmeza II - Medio

Características del Motor Eléctrico

Carrera 150 mm

Motor de 24 VDC a imanes permanentes

Esfuerzo máximo: 6000N


Velocidad a carga 0: 8,2 mm/s y a plena carga: 4 mm/s

Voltaje: 24V - Consumo corriente: 4,3A (media)

Ciclo de trabajo: 10%

Clase de Seguridad: II - Protección Standard: IPX1

Cumple directiva interferencias electromagnéticas

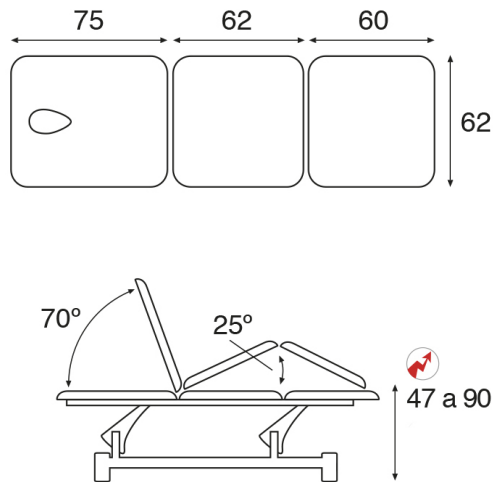TECHNICAL FEATURES C5526**General characteristics**

3 section electric twin pillar white frame table.

Standard upholstery dimensions: 62x198 cm (M46)

Optional upholstery dimensions: 70x198 cm (M66)

Recommended maximum weight: 175 Kg

Height variation: 47-90 cm

Electric motor-controlled height adjustable by side rails system.

Height adjustment with side misalignment < 20cm

Steel frame with white epoxy powder coating heated at 250°C
70 mm diameter steel legs. With table levellers in two of the feet.

Table with bearings.

Retractable castors with foot lever. Just for moving the table around, NOT intended for patient transportation.

Detachable white paper roll holder included as standard.

Standard backrest type T13 - Square backrest. Oval breather hole and bung included.

Head-/Backrest adjustable by gas spring.

Central section adjustable manually, by rack.

Approx. weight: 83 Kg

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.

Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.

Available in 25 colours.

Foam thickness 5 cm.

Foam firmness II - Soft

Electric Motor Features

Stroke length: 150 mm

24 VDC motor at permanent magnets

Power: 6000N - Average speed at load 0: 8,2 mm/s; max. load: 4mm/s

Voltage: 24V - Power consumption: 4,3A (average)

Working cycle: 10%

Safety class: II - Standar protection: IPX1

EMI (electromagnetic interference) Directive compliant

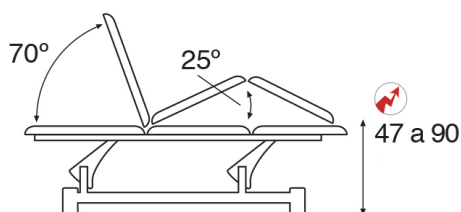
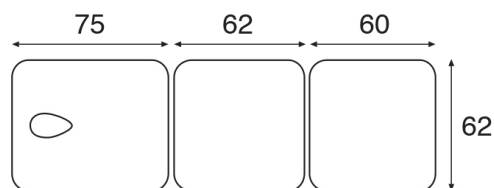
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C5526**Caractéristiques générales**

Table électrique bielle blanche 3 plans.

Dimensions standard de la sellerie: 62x198 cm (M46)

Dimensions optionnelles de la sellerie: 70x198 cm (M66)

Charge maximale recommandée: 175 Kg

Variation de la hauteur: 47-90 cm

Système de réglage de hauteur par système périphérique avec moteur.

Élévation avec déport latéral < 20cm

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C

Pieds de 70 mm de diamètre. Avec deux vis de compensation de sol à l'intérieur des pieds.

Chassis avec roulements.

Roulettes escamotables actionnement par pédale (pour déplacement à vide uniquement, pas pour transport patients).

Porte-rouleau blanc rabattable inclus de série.

Dossier standard type T13 - Dossier rectangulaire. Cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus.

Tête/dossier réglable par vérin à gaz.

Partie centrale réglable manuellement, avec crémaillère.

Poids approx: 83 Kg

Caractéristiques Sellerie

Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme

aux normes CE.

Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.

Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 5 cm.

Soutien de mousse II - Équilibré

Caractéristiques Moteur Électrique

Course du vérin: 150 mm

Moteur 24 VDC motor à aimants permanents


Puissance: 6000N - Vitesse moyenne en charge 0: 8,2 mm/s;

max. charge: 4mm/s

Voltage: 24 V - Consommation électrique: 4,3A (moyenne)

Cycle de travail: 10%

Norme de sécurité: II - Protection standard: IPx1
conforme à la directive européenne en matière de
perturbations électromagnétiques

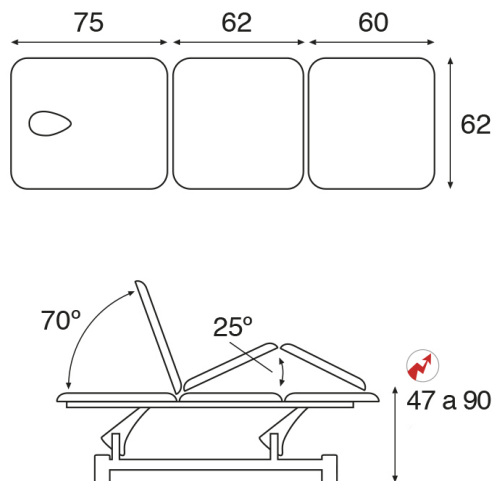

Allgemeine Eigenschaften

3 teilige Therapieliege, elektrisch mit weissen Rahmengestell

Masse der Standardsegmenten: 62x198 cm (M46)
 Masse der optionalen Segmenten: 70x198 cm (M66)
 Maximale Hubkraft: 175 Kg

Höhenverschiebung: 47-90 cm
 Höhenverstellung durch elektrischen Motor mit Rundumschaltung.
 Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <20cm
 Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weissen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt.
 Standbeine des Untergestelles mit Durchmesser von 70 mm. Standfüsse mit 2 Niveaueusgleicher.
 Therapieliege mit Kugellager am Rahmengestell ausgestattet

Einziehbare Räder durch Fusspedal schaltbar. Das Verschieben der Liege nur ohne Gewicht, NICHT für den Transport von Patienten geeignet.

Schwenkbarer weisser Rollenhalter bei Standardausführungen dabei.

Standard- Rückenteil Typ T13 - Rechteckiges Rückenteil. Ovaler Nasenschlitz mit Abdeckpolster inklusive

Kopfteil/ Rückenteil verstellbar durch Gasdruckfeder.
 Mittelteil ist manuell verstellbar durch Klemmsystem.

Ungefähres Gewicht: 83 Kg.

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2
 gemäß CE-Vorschriften.
 Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz
 Verfügbarkeit in 25 Farben.
 Dicke des Schaumstoffes 5 cm.
 Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen

Eigenschaften des elektrischen Motors

Hub 150 mm
 24 VDC Motor zu Permanentmagneten
 Maximale Kraftanstrengung : 6000N
 Lastgeschwindigkeit 0: 8,2 mm / s und Volllast: 4mm / s
 Spannung 24 V - Stromverbrauch: 4.3A (Durchschnitt)
 Arbeitszyklus: 10%
 Sicherheitsklasse: II - Standardschutz: IPx1
 Entspricht der Anweisungen für elektromagnetische Störungen