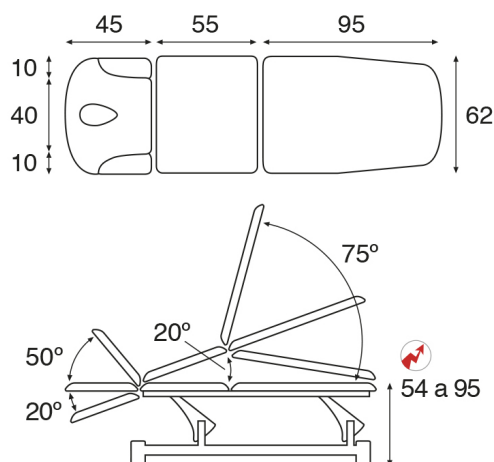


FICHA TÉCNICA C5530**Características generales**

Camilla eléctrica biela blanca multifuncional.

Dimensiones del lecho estándar: 62x200 cm (M47)

Peso máximo recomendado: 175 Kg

Variación de altura: 54-95 cm

Regulación de altura mediante motor eléctrico con accionamiento periférico.

Elevación con desplazamiento lateral < 20cm

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250°C

Patas de 70 mm de diámetro. Patas con nivelador ajustable en dos de ellas.

Camilla provista de rodamientos en la biela.

Ruedas escamoteables mediante pedal. Solo desplazamiento de la camilla en vacío, NO para el transporte de pacientes.

Portarrollos abatible blanco incorporado de serie.

Cabezal standard tipo T01- Cabezal con brazos regulables. Orificio lágrima y tapón incluido.

Módulo del cabezal/respaldo regulable mediante pistón hidráulico.

Módulo central regulable mediante motor eléctrico con mando de mano.

Módulo de la parte pies regulable mediante pistón hidráulico.

Peso aproximado: 98 Kg

Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.

Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.

Disponibles en 25 colores.

Grosor de la espuma 4 cm.

Espuma grado de firmeza III - Semiduro

Características del Motor Eléctrico

Carrera 150 mm

Motor de 24 VDC a imanes permanentes

Esfuerzo máximo: 6000N

Velocidad a carga 0: 8,2 mm/s y a plena carga: 4 mm/s

Voltaje: 24V - Consumo corriente: 4,3A (media)

Ciclo de trabajo: 10%

Clase de Seguridad: II - Protección Standard: IPX1

Cumple directiva interferencias electromagnéticas

Características del Motor Secundario

Carrera 100 mm

Motor de 24 VDC a imanes permanentes

Esfuerzo máximo: 4000N


Velocidad a carga 0: 11,2 mm/s y a plena carga: 6,8 mm/s

Voltaje: 24V - Consumo corriente: 3,5 A (media)

Ciclo de trabajo: 10%

Clase de Seguridad: II - Protección Standard: IPX1

Cumple directiva interferencias electromagnéticas

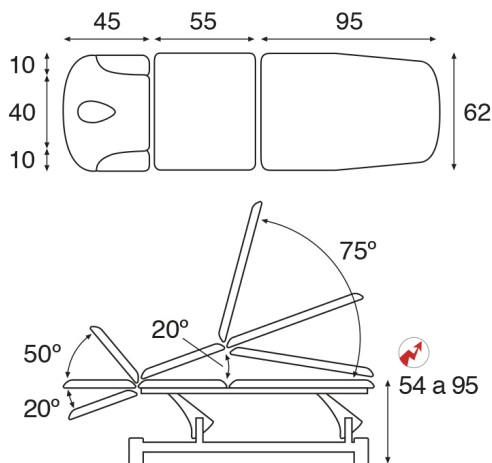TECHNICAL FEATURES C5530**General characteristics**

Electric twin pillar white frame multi-function table.

Standard upholstery dimensions: 62x200 cm (M47)

Recommended maximum weight: 175 Kg

Height variation: 54-95 cm

Electric motor-controlled height adjustable by side rails system.

Height adjustment with side misalignment < 20cm

Steel frame with white epoxy powder coating heated at 250°C
70 mm diameter steel legs. With table levellers in two of the feet.

Table with bearings.

Retractable castors with foot lever. Just for moving the table around, NOT intended for patient transportation.

Detachable white paper roll holder included as standard.

Standard headrest type T01 - Headrest with adjustable arm supports . Oval breather hole and bung included.

Head-/Backrest adjustable by gas spring.

Central section adjustable by electric motor with hand control.

Feet section adjustable by gas spring.

Approx. weight: 98 Kg

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.

Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.

Available in 25 colours.

Foam thickness 4 cm.

Foam firmness III - Medium firm

Electric Motor Features

Stroke length: 150 mm

24 VDC motor at permanent magnets

Power: 6000N - Average speed at load 0: 8,2 mm/s; max. load: 4mm/s

Voltage: 24V - Power consumption: 4,3A (average)

Working cycle: 10%

Safety class: II - Standar protection: IPX1

EMI (electromagnetic interference) Directive compliant

Secondary Motor Features

Stroke length: 100 mm

24 VDC motor at permanent magnets

Power: 4000N - Average speed at load 0: 11,2 mm/s; max. load: 6,8 mm/s

Voltage: 24V - Power consumption: 3,5 A (average)

Working cycle: 10%

Safety class: II - Standar protection: IPX1

EMI (electromagnetic interference) Directive compliant

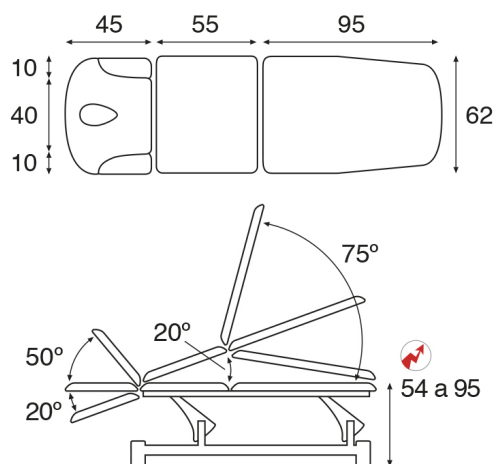
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C5530**Caractéristiques générales**

Table électrique bielle blanche multifonction.

Dimensions standard de la sellerie: 62x200 cm (M47)

Charge maximale recommandée: 175 Kg

Variation de la hauteur: 54-95 cm

Système de réglage de hauteur par système périphérique avec moteur.

Élévation avec déport latéral < 20cm

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C

Pieds de 70 mm de diamètre. Avec deux vis de compensation de sol à l'intérieur des pieds.

Chassis avec roulements.

Roulettes escamotables actionnement par pédale (pour déplacement à vide uniquement, pas pour transport patients).

Porte-rouleau blanc rabattable inclus de série.

Tête standard type T01 - Tête avec appui-bras réglables. Cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus.

Tête/dossier réglable par vérin à gaz.

Partie centrale réglable par vérin électrique avec commande manuelle.

Plateau jambes réglable par vérin à gaz.

Poids approx: 98 Kg

Caractéristiques Sellerie

Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.

Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.

Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 4 cm.

Soutien de mousse III - Ferme

Caractéristiques Moteur Électrique

Course du vérin: 150 mm

Moteur 24 VDC motor à aimants permanents

Puissance: 6000N - Vitesse moyenne en charge 0: 8,2 mm/s;

max. charge: 4mm/s

Voltage: 24 V - Consommation électrique: 4,3A (moyenne)

Cycle de travail: 10%

Norme de sécurité: II - Protection standard: IPx1
conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques

Caractéristiques Moteur Secondaire

Course du vérin: 100 mm

Moteur 24 VDC motor à aimants permanents


Puissance: 4000N - Vitesse moyenne en charge 0: 11,2 mm/s;

max. charge: 6,8 mm/s

Voltage: 24 V - Consommation électrique: 3,5 A (moyenne)

Cycle de travail: 10%

Norme de sécurité: II - Protection standard: IPX1
conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques

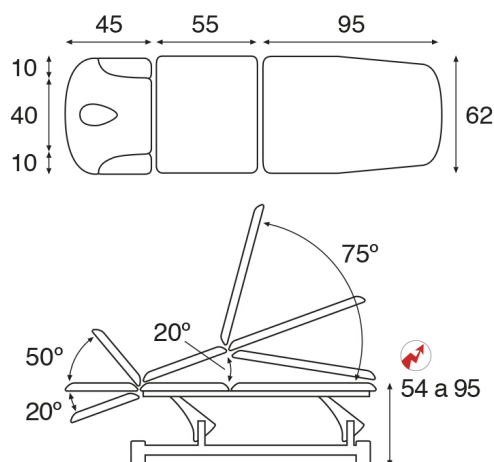TECHNISCHES DATENBLATT C5530**Allgemeine Eigenschaften**

Elektrische Therapieliegen für Multifunktion mit weissen Rahmengestell

Masse der Standardsegmenten: 62x200 cm (M47)

Maximale Hubkraft: 175 Kg

Höhenverschiebung: 54-95 cm

Höhenverstellung durch elektrischen Motor mit Rundumschaltung.

Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <20cm

Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weissen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt.

Standbeine des Untergestelles mit Durchmesser von 70 mm. Standfüsse mit 2 Niveaueusgleicher.

Therapieliege mit Kugellager am Rahmengestell ausgestattet

Einziehbarer Räder durch Fusspedal schaltbar. Das Verschieben der Liege nur ohne Gewicht, NICHT für den Transport von Patienten geeignet.

Schwenkbarer weisser Rollenhalter bei Standardausführungen dabei.

Standard- Kopfteil Typ T01 - Kopfteil mit verstellbaren Armlehnen. Ovaler Nasenschlitz mit Abdeckpolster inklusive

Kopfteil/ Rückenteil verstellbar durch Gasdruckfeder.

Mittelteil ist verstellbar durch elektrischen Motor mit Handschalter.

Beinteil ist verstellbar durch Gasdruckfeder.

Ungefähres Gewicht: 98 Kg.

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.

Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz

Verfügbarkeit in 25 Farben.

Dicke des Schaumstoffes 4 cm.

Härtegrad des Schaumstoffes III - Halbhart

Eigenschaften des elektrischen Motors

Hub 150 mm

24 VDC Motor zu Permanentmagneten

Maximale Kraftanstrengung : 6000N

Lastgeschwindigkeit 0: 8,2 mm / s und Vollast: 4mm / s

Spannung 24 V - Stromverbrauch: 4.3A (Durchschnitt)

Arbeitszyklus: 10%

Sicherheitsklasse: II - Standardschutz: IPx1

Entspricht der Anweisungen für elektromagnetische Störungen

Eigenschaften des zweiten Motores

Hub 100 mm

24 VDC Motor zu Permanentmagneten

Maximale Kraftanstrengung : 4000N

Lastgeschwindigkeit 0: 11,2 mm / s und Vollast: 6,8 mm / s

Spannung 24 V - Stromverbrauch: 3,5 A (Durchschnitt)

Arbeitszyklus: 10%

Sicherheitsklasse: II - Standardschutz: IPX1

Entspricht der Anweisungen für elektromagnetische Störungen