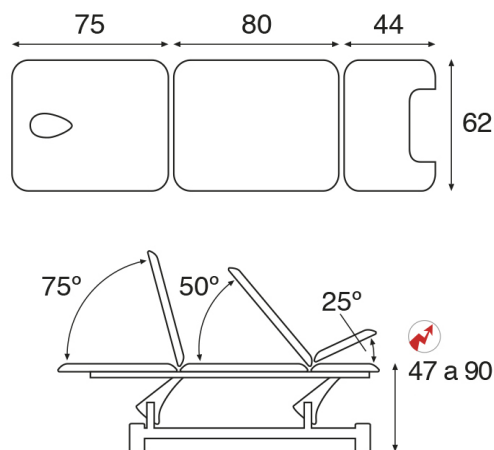


FICHA TÉCNICA C5581**Características generales**

Camilla eléctrica biela blanca especialidades.

Dimensiones del lecho estándar: 62x200 cm (M47)

Dimensiones de lecho opcional: 70x200 cm (M67)

Peso máximo recomendado: 175 Kg

Variación de altura: 47-90 cm

Regulación de altura mediante motor eléctrico con accionamiento periférico.

Elevación con desplazamiento lateral < 20cm

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250°C

Patatas de 70 mm de diámetro. Patas con nivelador ajustable en dos de ellas.

Camilla provista de rodamientos en la biela.

Ruedas escamoteables mediante pedal. Solo desplazamiento de la camilla en vacío, NO para el transporte de pacientes.

Portarrollos abatible blanco incorporado de serie.

Respaldo standard tipo T13 - Respaldo rectangular. Orificio lágrima con tapón incluido.

Perneras articuladas (A4705) regulables en altura y extraíbles.

Bandeja extraíble en acero inoxidable de 15x30x4 cm.

Módulo del cabezal/respaldo regulable mediante pistón hidráulico.

Módulo central regulable mediante pistón hidráulico.

Módulo de la parte pies regulable manualmente, mediante cremallera.

Peso aproximado: 89 Kg



Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.
Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.
Disponible en 25 colores.


Grosor de la espuma 5 cm.

Espuma grado de firmeza II - Medio

IMKKKKKKKKKKKKKKKK

Características del Motor Eléctrico

Carrera 150 mm
Motor de 24 VDC a imanes permanentes
Esfuerzo máximo: 6000N
Velocidad a carga 0: 8,2 mm/s y a plena carga: 4 mm/s
Voltaje: 24V - Consumo corriente: 4,3A (media)
Ciclo de trabajo: 10%
Clase de Seguridad: II - Protección Standard: IPX1
Cumple directiva interferencias electromagnéticas

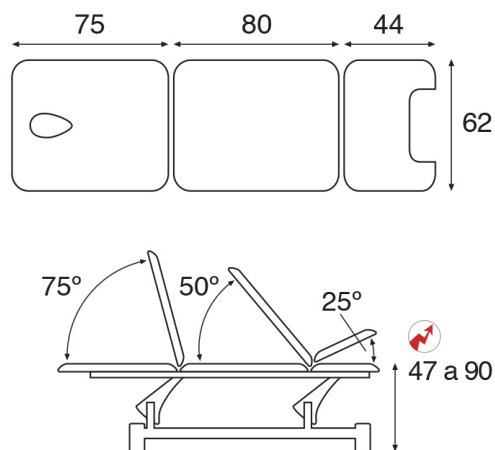TECHNICAL FEATURES C5581**General characteristics**

Electric twin pillar white frame speciality table.

Standard upholstery dimensions: 62x200 cm (M47)

Optional upholstery dimensions: 70x200 cm (M67)

Recommended maximum weight: 175 Kg

Height variation: 47-90 cm

Electric motor-controlled height adjustable by side rails system.

Height adjustment with side misalignment < 20cm

Steel frame with white epoxy powder coating heated at 250°C

70 mm diameter steel legs. With table levellers in two of the feet.

Table with bearings.

Retractable castors with foot lever. Just for moving the table around, NOT intended for patient transportation.

Detachable white paper roll holder included as standard.

Standard backrest type T13 - Square backrest. Oval breather hole and bung included.

Articulated leg supports (A4705) height adjustable and removable.

Stainless steel removable tray 15x30x4 cm.

Head-/Backrest adjustable by gas spring.

Central section adjustable by gas spring.

Feet section adjustable manually, by rack.

Approx. weight: 89 Kg



ecopostural

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.
Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.
Available in 25 colours.

Foam thickness 5 cm.

Foam firmness II - Soft

Electric Motor Features

Stroke length: 150 mm

24 VDC motor at permanent magnets

Power: 6000N - Average speed at load 0: 8,2 mm/s; max. load: 4mm/s


Voltage: 24V - Power consumption: 4,3A (average)

Working cycle: 10%

Safety class: II - Standar protection: IPX1

EMI (electromagnetic interference) Directive compliant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C5581

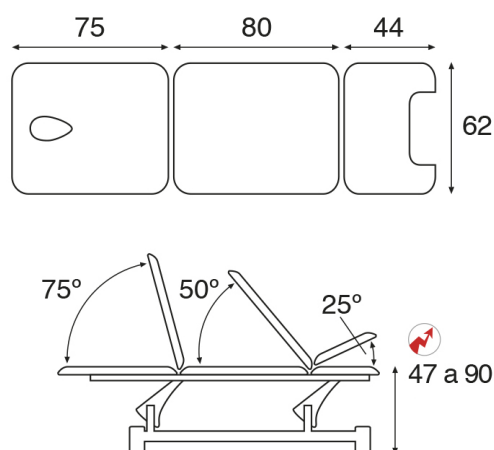

Caractéristiques générales

Table électrique bielle blanche spécialités.

Dimensions standard de la sellerie: 62x200 cm (M47)

Dimensions optionnelles de la sellerie: 70x200 cm (M67)

Charge maximale recommandée: 175 Kg

Variation de la hauteur: 47-90 cm

Système de réglage de hauteur par système périphérique avec moteur.

Elévation avec déport latéral < 20cm

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C

Pieds de 70 mm de diamètre. Avec deux vis de compensation de sol à l'intérieur des pieds.

Chassis avec roulements.

Roulettes escamotables actionnement par pédale (pour déplacement à vide uniquement, pas pour transport patients).

Porte-rouleau blanc rabattable inclus de série.

Dossier standard type T13 - Dossier rectangulaire. Cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus.

Jambières articulées (A4705) réglables en hauteur et amovibles.

Cuvette de 15x30x4 cm en acier inoxydable et amovible.

Tête/dossier réglable par vérin à gaz.

Partie centrale réglable par vérin à gaz.

Plateau jambes réglable manuellement, avec crémaillère.

Poids approx: 89 Kg



ecopostural

Caractéristiques Sellerie

Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.

Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®. Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 5 cm.

Soutien de mousse II - Équilibré

Caractéristiques Moteur Électrique

Course du vérin: 150 mm


Moteur 24 VDC motor à aimants permanents

Puissance: 6000N - Vitesse moyenne en charge 0: 8,2 mm/s; max. charge: 4mm/s

Voltage: 24 V - Consommation électrique: 4,3A (moyenne)

Cycle de travail: 10%

Norme de sécurité: II - Protection standard: IPx1 conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques

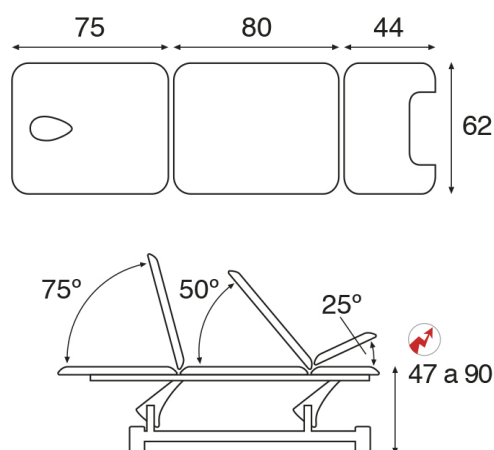TECHNISCHES DATENBLATT C5581**Allgemeine Eigenschaften**

Elektrische Therapieliegen mit weissen Rahmengestell für spezielle Techniken

Masse der Standardsegmenten: 62x200 cm (M47)

Masse der optionalen Segmenten: 70x200 cm (M67)

Maximale Hubkraft: 175 Kg

Höhenverschiebung: 47-90 cm

Höhenverstellung durch elektrischen Motor mit Rundumschaltung.

Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <20cm

Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weissen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt.

Standbeine des Untergestelles mit Durchmesser von 70 mm. Standfüsse mit 2 Niveauausgeicher.

Therapieliege mit Kugellager am Rahmengestell ausgestattet

Einziehbare Räder durch Fusspedal schaltbar. Das Verschieben der Liege nur ohne Gewicht, NICHT für den Transport von Patienten geeignet.

Schwenkbarer weisser Rollenhalter bei Standardausführungen dabei.

Standard- Rückenteil Typ T13 - Rechteckiges Rückenteil. Ovaler Nasenschlitz mit Abdeckpolster inklusive

Beinstützen (A4705) schwenkbar und verstellbar in Höhe und ausziehbar.
Ausziehbare Edelstahlschale von 15x30x4 cm.

Kopfteil/ Rückenteil verstellbar durch Gasdruckfeder.

Mittelteil ist verstellbar durch Gasdruckfeder

Beinteil ist manuel verstellbar durch Klemmsystem.

Ungefähres Gewicht: 89 Kg.



ecopostural

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.
Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz
Verfügbarkeit in 25 Farben.

Dicke des Schaumstoffes 5 cm.

Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen

Eigenschaften des elektrischen Motors

Hub 150 mm

24 VDC Motor zu Permanentmagneten

Maximale Kraftanstrengung : 6000N

Lastgeschwindigkeit 0: 8,2 mm / s und Volllast: 4mm / s

Spannung 24 V - Stromverbrauch: 4.3A (Durchschnitt)

Arbeitszyklus: 10%

Sicherheitsklasse: II - Standardschutz: IPx1

Entspricht der Anweisungen für elektromagnetische Störungen