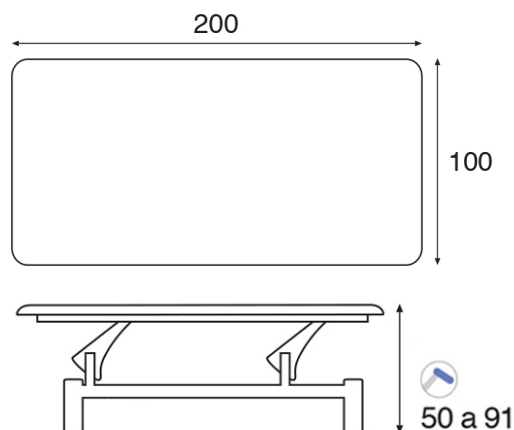


FICHA TÉCNICA C5704**Características generales**

Camilla hidráulica biela blanca especialidades.

Dimensiones del lecho estándar: 100x200 cm (M87)

Dimensiones de lecho opcional: 120x200 cm (M97)

Peso máximo recomendado: 175 Kg

Variación de altura: 50-91 cm

Regulación de altura mediante sistema de bomba hidráulica accionada con pedal mecánico.

Elevación con desplazamiento lateral < 20cm

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250°C

Patas de 70 mm de diámetro. Patas con nivelador ajustable en dos de ellas.

Camilla provista de rodamientos en la biela.

Ruedas escamoteables mediante pedal. Solo desplazamiento de la camilla en vacío, NO para el transporte de pacientes.

Peso aproximado: 96 Kg

Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.

Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.

Disponibles en 25 colores.

Grosor de la espuma 5 cm.

Espuma grado de firmeza II - Medio


Características del Elevador Hidráulico

Carrera de 140 mm

Fuerza de empuje: 10000N a 270 Bar

Máxima carga estática: 12500N

Nº de accionamientos del pedal: 24-35

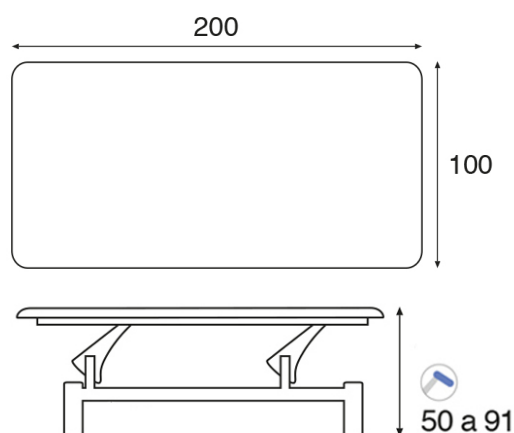TECHNICAL FEATURES C5704**General characteristics**

Hydraulic twin pillar white frame speciality table.

Standard upholstery dimensions: 100x200 cm (M87)

Optional upholstery dimensions: 120x200 cm (M97)

Recommended maximum weight: 175 Kg

Height variation: 50-91 cm

Hydraulic gas-spring assisted by foot pump.

Height adjustment with side misalignment < 20cm

Steel frame with white epoxy powder coating heated at 250°C

70 mm diameter steel legs. With table levellers in two of the feet.

Table with bearings.

Retractable castors with foot lever. Just for moving the table around, NOT intended for patient transportation.

Approx. weight: 96 Kg

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.

Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.

Available in 25 colours.

Foam thickness 5 cm.

Foam firmness II - Soft

Hydraulic System Features


Stroke length: 140 mm

Push force: 10000N a 270 Bar

Maximum static load: 12500N

Nr. of pumpstrokes: 24-35

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C5704

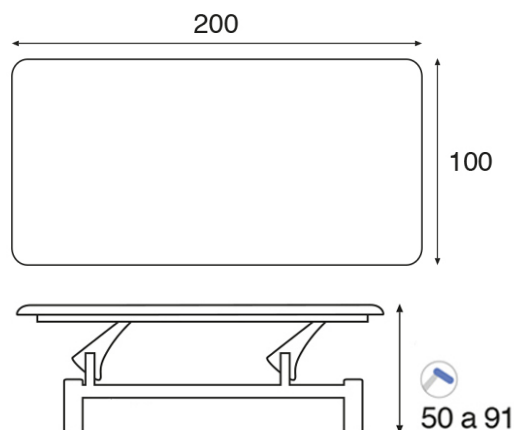

Caractéristiques générales

Table hydraulique bielle blanche spécialités.

Dimensions standard de la sellerie: 100x200 cm (M87)

Dimensions optionnelles de la sellerie: 120x200 cm (M97)

Charge maximale recommandée: 175 Kg

Variation de la hauteur: 50-91 cm

Système de réglage de la hauteur par pédale hydraulique.

Elévation avec déport latéral < 20cm

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C

Pieds de 70 mm de diamètre. Avec deux vis de compensation de sol à l'intérieur des pieds.

Chassis avec roulements.

Roulettes escamotables actionnement par pédale (pour déplacement à vide uniquement, pas pour transport patients).

Poids approx: 96 Kg

Caractéristiques Sellerie

Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.

Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.

Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 5 cm.

Soutien de mousse II - Équilibré


Caractéristiques Pompe Hydraulique

Course du vérin: 140 mm

Force de poussée: 10000N à 270 Bar

Charge statique maximum: 12500N

N° d'appuis: 24-35

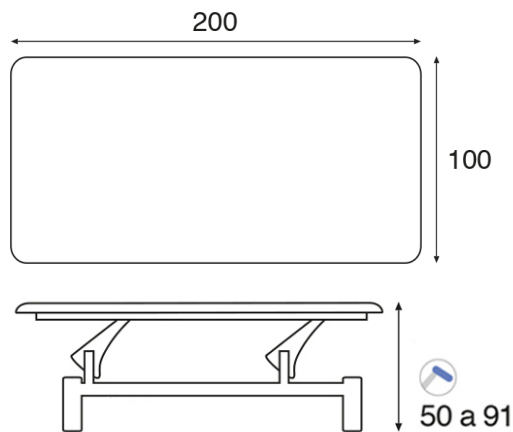TECHNISCHES DATENBLATT C5704**Allgemeine Eigenschaften**

Hydraulisch Spezial-Therapieliegen mit Rahmengestell

Masse der Standardsegmenten: 100x200 cm (M87)

Masse der optionalen Segmenten: 120x200 cm (M97)

Maximale Hubkraft: 175 Kg

Höhenverschiebung: 50-91 cm

Höhenverstellung durch Gasdruckfeder , einstellbar mit mechanischen Fusspedal.

Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <20cm

Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weissen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt.

Standbeine des Untergestelles mit Durchmesser von 70 mm. Standfüsse mit 2 Niveauausgleicher.

Therapieliege mit Kugellager am Rahmengestell ausgestattet

Einziehbare Räder durch Fusspedal schaltbar. Das Verschieben der Liege nur ohne Gewicht, NICHT für den Transport von Patienten geeignet.

Ungefähres Gewicht: 96 Kg.

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.

Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz
Verfügbarkeit in 25 Farben.

Dicke des Schaumstoffes 5 cm.

Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen

Eigenschaften der Gasdruckfeder

Hub 140 mm

Schubkraft: 10000 N bis 270 Bar

Maximale statische Last: 12500N

Anzahl der Pedalantriebe: 24-35